

Dünya Çapında 1 Milyondan Fazla Kullanılan İmplant


ETIII SA

OSSTEM[®]
IMPLANT

- Hem konik yapıli hem de düz yapıli implant özelliklerini birleştiren iyileştirilmiş tasarım
- Sadece 2 adımlı frezleme sekansı ile implantasyonu sağlayan Taper Drilling sistemi ile yerleştirilebilir.
- ABD’de ilk 5 satış hacmi

Konik Gövde ve Düz Gövde Yapılı İmplantların Birleştirilmiş Özellikleri

- Konik gövde , ameliyat süresini kısaltan ve primer stabiliteyi sağlayan daha iyi bir ilk girişe izin verir.
- Düz gövde yapıli implantlar ile benzer derinlik kontrolü

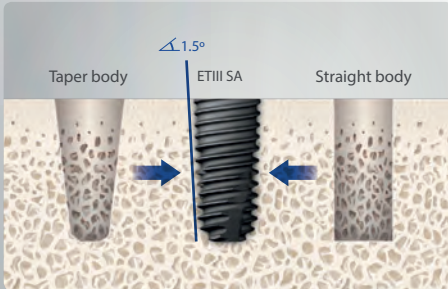

Başlangıç girişi nedir?


Son delme işleminden sonra, implant dönmeden kemiğe nüfuz edilebilir derinlik.

SA Yüzey

Alumina ile kumlanmış ve Asitlenmiştir. (Ra 2.5~3.0µ)

Sadece 2 Frezleme Adımıyla İmplant Yerleşimi

- 122 Taper cerrahi prosedürünü uygulayarak sadece 1 ya da 2 frezleme adımları ile implant yerleştirilir.
- Stoperlar, hassas delme derinliğinin korunmasına yardımcı olur.
- Delme deliğini implant şekliyle eşleştirerek optimum yetleştirme torkunu (20 - 40Ncm) elde edin.

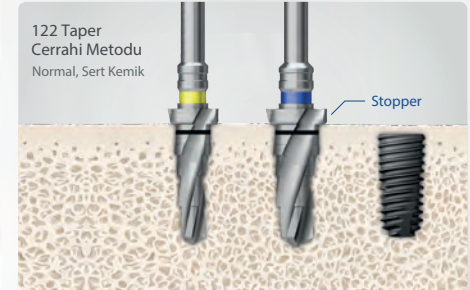

ABD’de İlk 5 Satış Hacmi

- Dentistry Today ve Dental Product Shopper tarafından performans ve kalite açısından en iyi implant markalarından biri olarak kabul edildi
- Sıkı ABD standartlarını karşılayan bir kalite yönetim sisteminde üretilmiştir.



* OSSTEM yüksek memnuniyete ulaşan klinik eğitim kursları düzenlemektedir.

- 1) Dental Implants Market Analysis, Millennium Research Group
- 2) Dentistry Today(2011~2016), Dental Product Shopper(2011~2012)

70'den fazla ülkede 5 milyondan fazla satıldı


OSSTEM
IMPLANT

TSSA Fixture

- Rahat ve hızlı yerleştirme, güvenli birincil sabitleme
- Tüm endikasyonlara yanıt vermek için çeşitli özellikler
- Klinik olarak kanıtlanmış SA yüzey

Rahat ve hızlı yerleştirme, güvenli birincil sabitleme

- Rahat yerleştirme için mükemmel selftapping
- İkili yiv yapısı hızlı yerleşme sağlar.
- Optimize edilmiş gövde şekli ile güvenli birincil sabitleme sağlanır.

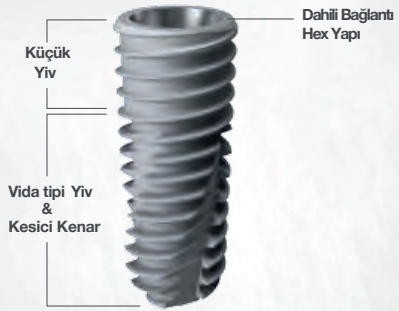

Tüm endikasyonlara yanıt vermek için çeşitli özellikler

Straight

TSII (0°)



Taper

TSIII (1.5°)



Taper

TSIV (6°)



TSIV

Softbone ilk fiksasyonunu sağlamak için kullanılır.

Ultra-Wide

Molarekstraksiyonundasonra hemen yerleştirme için kullanılır

3.0 Fixture

Dar interdental boşluklarda kullanılır

Extra Short

Dikey kemik kütlesi eksikliği için kullanılır

Klinik olarak kanıtlanmış SA yüzey

- Kemik oluşumunun hazırlanması crater ve micro pit oluşumu
- Stabil kemik oluşumu için optimum yüzey pürüzlülüğü (Ra 2.5 ~ 3.0 µm)
- Maksiller ve posterior da dişsiz vakada erken yüklem durumunda 97%(3M), 100%(6M) sağ kalım oranları*

* Int J Periodontics Restorative Dent.2015;35:21-276

