


Anterior İmplantta Estetik Protez

Link Abutment

- Estetik şekil ve renk üretebilen özel zirkonya abutment
- Klinik ortamı göz önünde bulunduran line-up
- Sadece oral taratıcı ile CAD yazılımında en uygun spesifikasyonu kolayca seçin.

Estetiki şekiller ve renklerde üretilen özel zirkonya abutmentler

- CAD yazılımıyla optimum çıkış profilini, marjin hattını, abutment ve kronu aynı anda tasarlayın

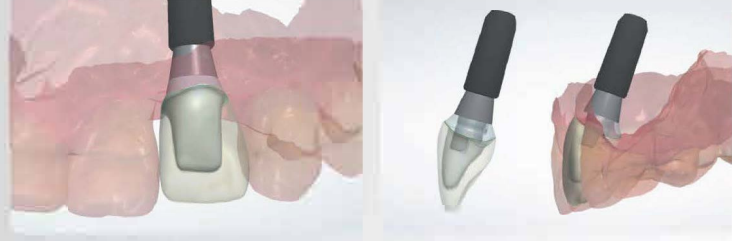


- Zirkonya gövde ile meralik renklerin arasından görünmeyen doğal tonlar



TS Link abutment + Zirkonya kron, ki seong Kin, Namsang diş kliniği

CAD yazılımı ağız içi tarama ile optimum özelliklerine uygun seçim

- Oral Scan file ile kronu tasarlayın ve çeşitli abutment spesifikasyonları arasından en uygun olanı seçin.
- Kron tasarımından sonra en uygun abutment tipi(açık/silindirik), yükseklik, gingiva yüksekliği CAD yazılımında rahatlıkla seçilebilir

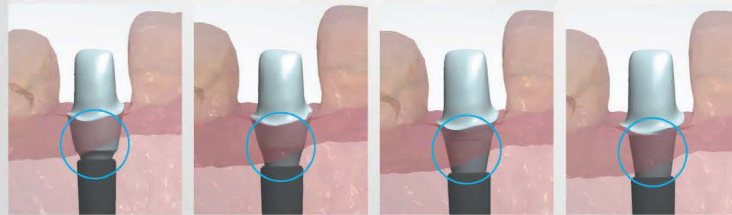

G/H:1mm

3mm

3mm

4mm



Vida tipi




Simante tip

Klinik ortamı göz önünde bulunduran line-up

- Anterior anatomik şekil ve implant yerleştirme koşulları dikkate alınarak Open type line-up
- 4mm/6mm gövde yüksekliği ile, dikey olarak mükemmel şekilde uyum bir özellik seçin
- 1 mm/2mm/3mm/4mm gingiva yüksekliği ile implant derinliğine göre seçim yapın.



Anterior implant açısını dikkate alan open type spesifikasyonu

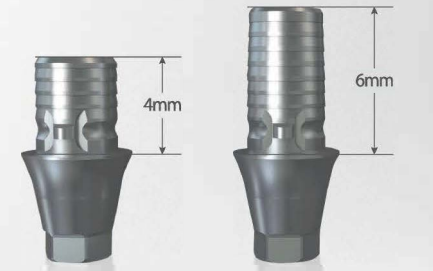

Kron tutma parçası yükseklik line-up



İmplant derinliği dikkate alınarak çeşitli G/H line-up

Analog Workflow

- Kauçuk ölçü alındıktan sonra laboratuvarda bir model tarayıcı kullanı lan workflow


- Klinik : Genel implant seviyesinde ölçü
- Laboratuvar: Model tarama - tasarım - frezleme



Dijital Workflow

- Oral Tarayıcı ve 3D Printer Tercih edilen dijital workflow

- Klinik : Oral Tarama
- Laboratuvar: Tasarım - Frezleme - Frezleme + 30 baskı

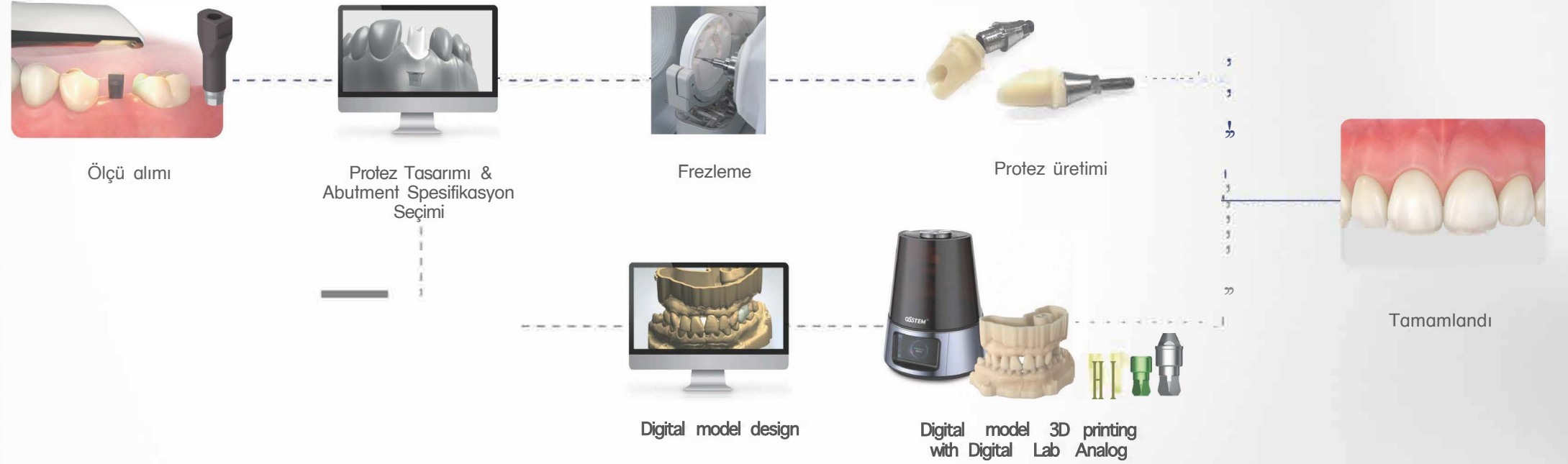

Linkfor Cerec

- Cerec Link Abutment'ın benzersiz özellikleri
- İmplant yerleştirme derinliğini dikkate alan G/ H line-up (1 mm/ 3 mm)
- Düşük yükseklik sebebiyle tarama zor olduğunda, bir tarama postu ile çözülebilir.
- Link abutmanı implanta bağladıktan sonra Cerec Scan gövdesini sabitleyerek oral tarama

