

Cerrahi Kolaylığı Elde Etmek İçin **Beş Temel Araç**

Assist KIT


Beş Temel Araç (KIT Bileşenleri)

1. Tissue Punch
2. Bone Profiler
3. Trepine Drill
4. Crest Remover
5. Autobone Collector

1 Tissue Punch

Gingiva İnsizyonlarını En Aza İndirerek İyileşme Süresini Azaltır


- Guide-pin yapısı dokuların tam olarak yerinde çıkarılmasına izin verir
- İyileşme abutmentinden 0,7-1,5 mm daha küçük bir çapa sahip tissue punch önerilir

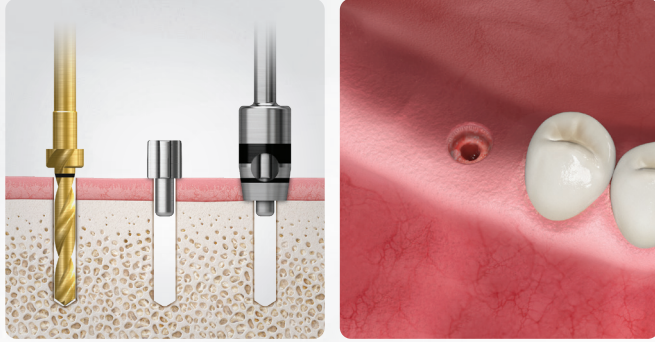


2 Bone Profiler

İmplantın İç Hasar Vermeden Rahat Kemik Çıkarma

- İmplant etrafındaki çıkıntılı kemiklerin daha kolay çıkarılması mümkündür.
- Çıkarılabilir guide, implantın iç kısmına zarar vermeden kemiklerin temizlenmesini sağlar.

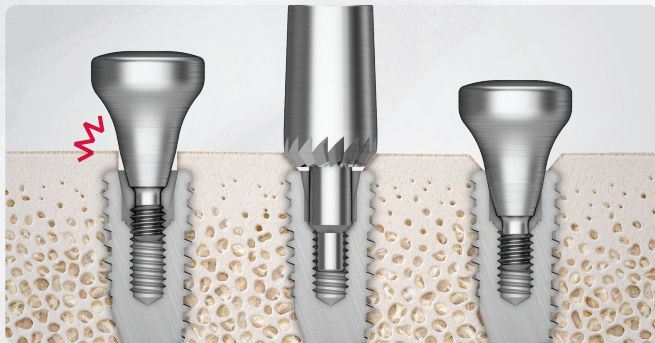


Kemik Teması → Çıkarılan Kemik → Normal Sabitleme

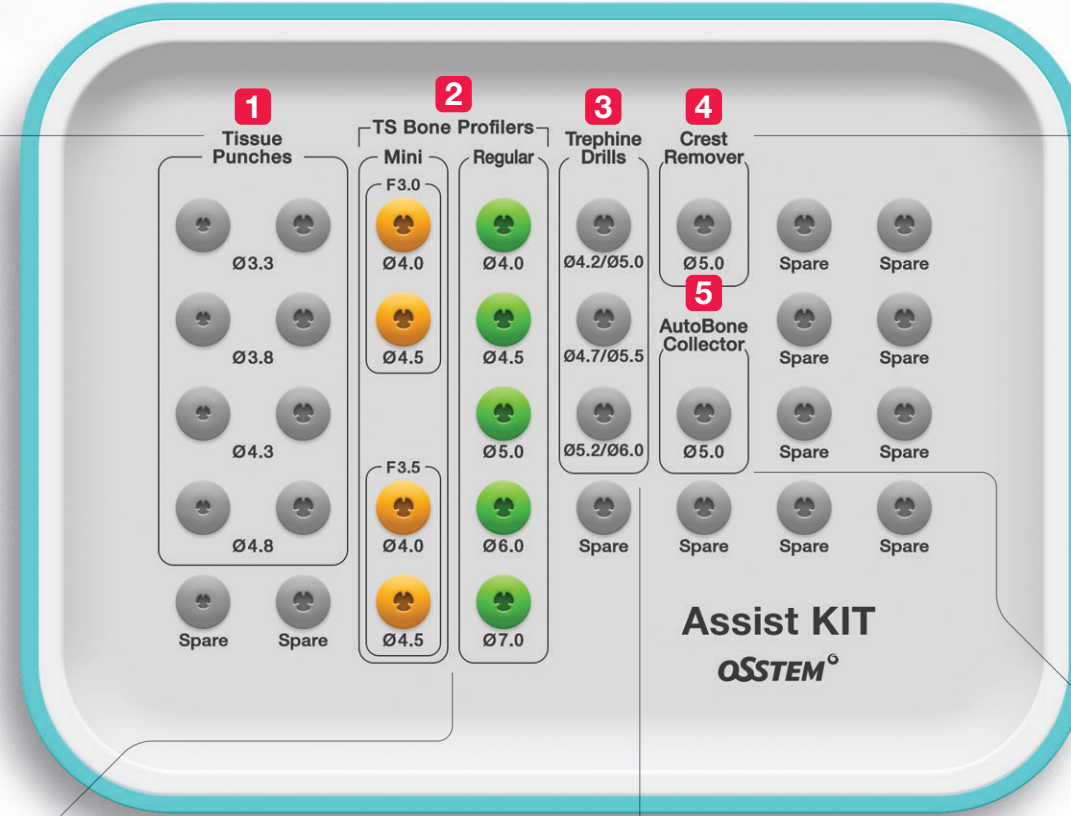

4 Crest Remover

Ağ Gibi Tasarım Kretin Hızlı ve Basit Bir Şekilde Temizlenmesini Sağlar


- Bıçak, yuvarlak frez ile karşılaştırıldığında kenar fenomenini en aza indirmek için ağ şeklinde tasarlanmıştır.

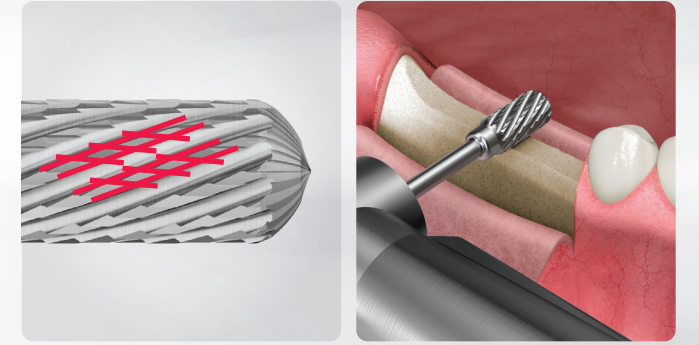

3 Trepine Drill

Çıkarılan Kemik Miktarını En Aza İndirmek için 0,4 mm Bıçak Kalınlığı

- Mükemmel kesme kuvveti, blok kemiğin kolayca alınmasını veya fail implantların çıkarılmasını sağlar - bir tarafta 0,4 mm kalınlık, çıkarılan kemik miktarını diğer şirketlerden daha iyi bir performans ile en aza indirir.

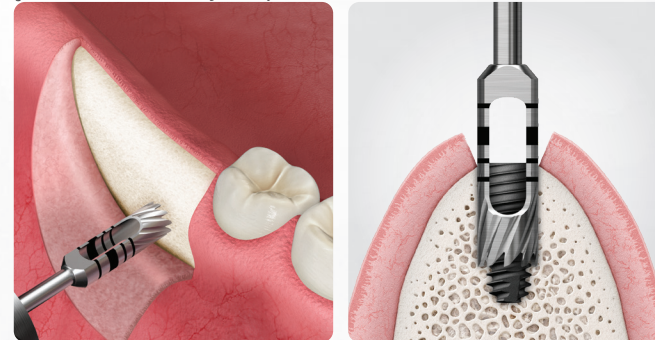

5 Autobone Collector

Sadece Frezleme ile Daha Kolay Kemik Toplama

- Mükemmel kesme kuvveti ve tasarımı ile çene kemiğini toplamak için basit ve hızlıdır
- Stoper sayesinde daha güvenli kemik toplama işlemi (0,18 g tek seferde alınır)

